


“吸引ケア”を行うすべての方へ ～停電・災害時 を想定した“吸引ケアの備え”～

対象：医療・介護の専門職の方、ご家族・支援者の方、施設職員の方、災害対策担当者の方

1982年から災害対策に取り組んできたメーカーとして、
阪神・淡路大震災や東日本大震災の教訓を活かし、
電源喪失時でも使用できる吸引ケアの備えをご提案します。



ご自宅・病院・施設内
での予期せぬ停電

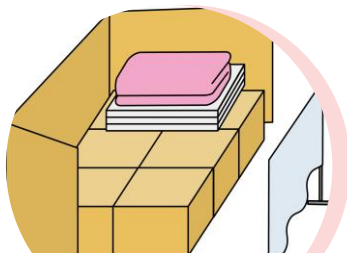

長引く停電での
吸引ケアの対応

「停電＝吸引できない」を防ぐために。
電源喪失を想定した備えとして、
“電源不要タイプ”と“省電力タイプ”
2機種の吸引器をご紹介します。

▷ 電源不要タイプの特徴

停電・災害時に想定される **長時間** の電源喪失に対応します。

電気を使わずに動作する**足踏み式吸引器**なら、
電源が確保できない状況でも **-40kPa までの吸引ケアが可能**です。

▷ 省電力タイプ（3電源対応）の特徴

停電・災害時に想定される **数時間** の電源喪失に対応します。

消費電力はわずか **40VA**。さらに **エコモード機能** も搭載。

AC電源・内蔵充電電池・自動車用DC電源の3つの電源に対応し、
電源喪失時にも運転・バッテリー駆動・バッテリー充電が可能です。

ブルークロスフットサクショポンプ FP-300

災害・停電時にも“慌てない吸引ケア”を！


販売開始から40年以上の実績。東日本大震災以降も選ばれ続けている、電源を必要としない吸引器です。



電源は不要です



圧縮→解放
で吸引ケアが可能

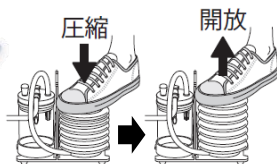

☑ 防災の備えに最適

電気に頼らず使える安心設計。
災害を見据えて生まれた足踏み式吸引器は、
わずか950gの軽さで、非常時の携帯にも安心です。

☑ 足で踏み下ろすだけで使用可能

ポンプを圧縮し、その復元力によってボトル
内部が負圧となり、吸引ケアが可能になります。
※何度か試してみることで、安心感が高まります。

☑ 電動式吸引器並みの吸引力

最大吸引流量が25L/min、最大吸引圧が-40kPa
(-300mmHg)なので電源喪失時に優れた機能を
発揮します。

長引く停電“電源喪失”を想定した無電源式
長時間の電源喪失を想定した吸引器です

本品(吸引ポンプ・ゴムキャップ)は天然ゴムを使用しています。ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みください

吸引器 3WAY

医療機器認証番号：302AGBZX00058000 医療機器分類：管理医療機器（クラスⅡ）

災害・停電時にも“変わらぬ吸引ケア”を！

災害対策を前提に開発された3WAYシリーズ。進化を重ねた今も、30年以上の信頼が息づいています。

家庭用
AC電源

充電式内蔵
バッテリー

自動車用
DC電源



☑ 防災の備えに最適

3電源方式（AC・DC・バッテリー）に対応して
いるため、電源喪失による吸引不能リスクを
大幅に軽減します。

☑ 持ち運びやすいコードリール式

電源コードは本体にすっきり収納可能。
重さわずか2.8kgの軽量設計。バッテリー内蔵
タイプのため、外付けの充電器は不要です。

☑ 省電力設計で停電時も安心

消費電力わずか40VA。だから非常時にも
使える吸引器。エコモード機能も搭載しています。
限られた電力を、確かな吸引ケアへ。

あらゆる“電源喪失”に対応する3電源方式
数時間の電源喪失を想定した吸引器です

充電時間：約90分 通常モード：約90分 作動 エコモード：約120分 作動